

# AED使用の手順

小学生以上・成人

## ①【電源を入れる】

機種により・・・

- ・ふたを開けると自動的に電源が入るタイプ
- ・電源ボタンを押すタイプ

## ②【電極パッドを貼り付ける】

パッドに書かれた絵のとおり、  
直接素肌にしっかりと貼り付ける



▲成人用電極パッド

貼り付け時に特に注意をはらうべき状況

- ・胸が濡れている → 乾いた布やタオルで胸を拭く
- ・貼り薬がある → 剥がす
- ・医療器具が胸に埋め込まれている → 出っ張りを避ける



注意

小児用パッド・小児用モードは、

成人に対しては、使用しないこと！


※小児用パッド・小児用モードは乳児を含む未就学児に使用します

## ③【心電図の解析】

「身体から離れて下さい」等のメッセージで、  
心電図の自動解析が始まる。

※このとき、傷病者の身体には触れないでください！

## ④【電気ショックと心肺蘇生】

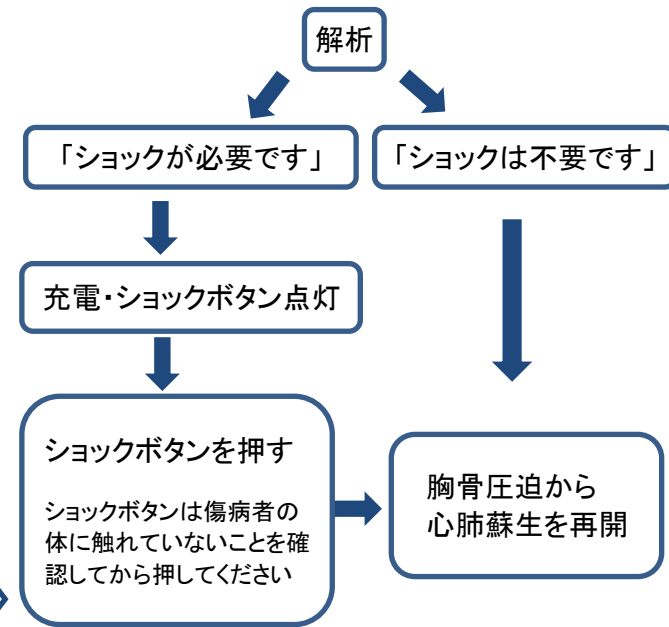

AEDは、2分おきに自動解析します。  
そのつど発せられる音声メッセージに従い、  
心肺蘇生をできるだけ絶え間なく続けましょう。

救急隊に引き継ぐまで

AEDの電極パッドは、傷病者の胸から  
剥がさず、電源も入れたままにしておく。

乳児を含む未就学児

## ①【電源を入れる】

機種により・・・

- ・ふたを開けると自動的に電源が入るタイプ
- ・電源ボタンを押すタイプ

## ②【電極パッドを貼り付ける】

パッドに書かれた絵のとおり、  
直接素肌にしっかりと貼り付ける



未就学児



乳児

▼小児用電極パッド



※小児用電極パッドがない場合  
成人用電極パッドを代用する

成人用パッドを代用する場合は、  
パッドどうしが接触しないように！

◎小児用モードを搭載した機種もある

(小児用モードでは成人用電極パッドを使用)